

新開発

X線防護衣用 吸湿消臭マット

プロテクリーン

ProteClean

ハンガーに掛けるだけ!プロテクタの簡単日常ケア

その汗、ほっておくと、
臭いやカビの原因に。



仕様

サイズ：60×37×4cm(吊下げ時)
シート厚み：0.7cm
側生地：ポリエステル100%
中身：シリカゲル100%
生産国：日本製


シリカクリン®のシリカゲルパワーで吸湿・消臭

高性能シリカゲルを挟み込んだ
シリカクリン®を採用しました。



● 吸湿センサー

湿度に反応してセンサーの色
が変わります。ブルーがピンク
色になると湿気がたまって
いますので乾燥させてください。

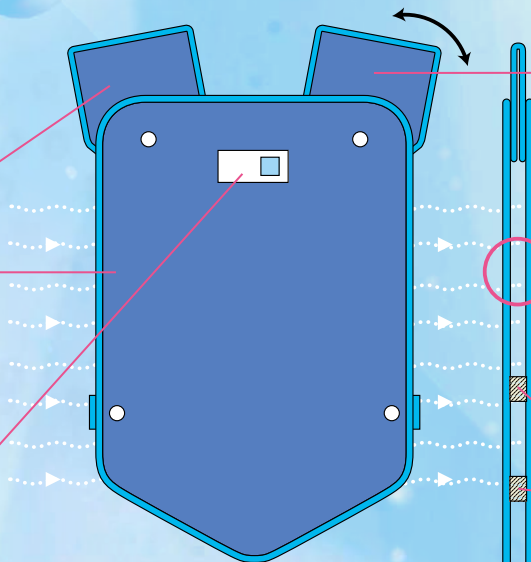

● 肩部マット

可動式のマットで汗の気
になる肩もしっかりケア
します。


● 前後面マット

シリカクリン®を2面構造
にする事でプロテクタ内
面にしっかりフィットし、
吸湿消臭効果を高めます。


● スペースー

内部にあるスペースー
により通気性を確保します。

ハンガーに掛けるだけの簡単日常ケア 高機能シリカクリン®をX線防護衣用にカスタマイズ!

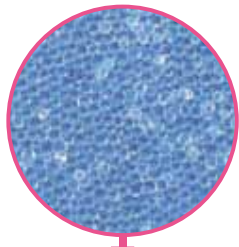

600g/m²のシリカゲルが
コップ(200ml)2.4杯の水を
吸蓄!

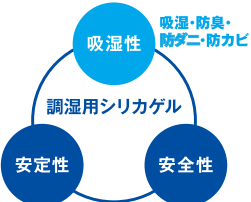

シリカクリン®の高い速乾・消臭・吸湿効果

高機能な乾燥剤・吸着剤「シリカゲル」を使用!


- 4大効果**
- [吸湿効果] 多孔質構造で、内部表面積は大きく空気中の水分を多量に吸着します。
 - [防臭効果] 湿気と一緒に臭いも吸収して、除去する特徴があります。
 - [防ダニ効果] 乾燥を嫌うダニ等はシリカゲルの効果により生息できなくなります。
 - [防カビ効果] 湿気や汗等で発生しやすいカビは速乾性により発生を防ぐことができます。




- [安全性] 食品添加物、医薬品添加物などに許可されており安全です。
- [安定性] 主成分の二酸化ケイ素は、地殻の60%以上を占める非常に安定した物質で、成分変化がありません。

実証済!! 速乾・消臭・除湿に、驚異的な効果を発揮!


●速乾効果※1

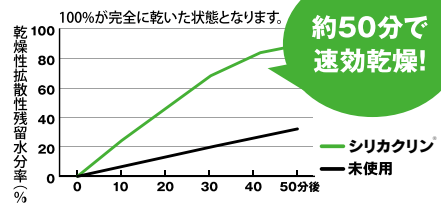


●消臭効果※2

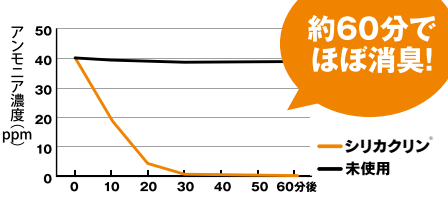

●除湿効果※2

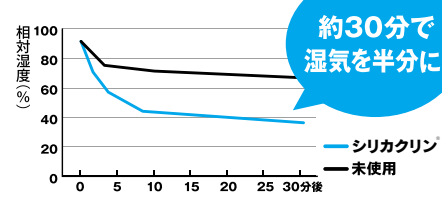


※1 一般財団法人カケンテストセンター調べ ※2 財団法人日本化学繊維検査協会調べ

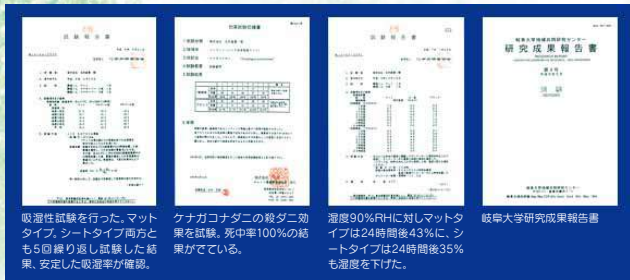

乾かすことによって何度でも使用可能。

吸湿センサー付きで、風通しの良い所などで乾燥しますと、速乾・消臭・除湿効果が何度でも再生します。

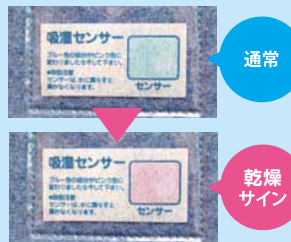

- ※本製品は医療機器ではありません。
- ※本製品は特許、意匠登録出願済です。
- ※シリカクリンはテクナード株式会社の登録商標です。

製造元

Technad テクナード株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1134-1

発売元 [お問い合わせ先]

MediCore 株式会社メディコア
福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘1-6-12
TEL.050-3708-1721 FAX.092-510-1934
<http://www.medi-core.co.jp>